

# HOMEDICS®

## Automatic Wrist Blood Pressure Monitor



Please Take A Moment Now

### Register

Your Product At:

[www.homedics.com/register](http://www.homedics.com/register)  
Your valuable input regarding this product will help us create the products you will want in the future.

BPW-040  
Ver. C

El manual en  
español empieza  
en la página 28

**5** year  
limited warranty






# TABLE OF CONTENTS

## **INTRODUCTORY INFORMATION:**






<b>Important Product Notices and Safety Instructions .....</b>	<b>3</b>
<b>About Blood Pressure .....</b>	<b>5</b>
<b>Blood Pressure Standard.....</b>	<b>5</b>
<b>How This Blood Pressure Monitor Works.....</b>	<b>7</b>

## **USAGE INFORMATION:**

<b>Name/Function of Each Part .....</b>	<b>8</b>
<b>Display Explanations .....</b>	<b>9</b>
<b>Installing Batteries .....</b>	<b>11</b>
<b>Date &amp; Time Set Procedure.....</b>	<b>12</b>
<b>Applying the Cuff.....</b>	<b>13</b>
<b>Correct Measurement Posture .....</b>	<b>14</b>
<b>Measurement Procedure.....</b>	<b>15</b>
<b>Risk Category Index .....</b>	<b>17</b>
<b>Recalling Values from Memory.....</b>	<b>18</b>
<b>Clearing Values from Memory .....</b>	<b>19</b>
<b>Important Notes Regarding Your Blood Pressure Measurement.....</b>	<b>20</b>

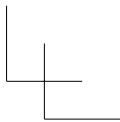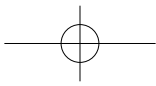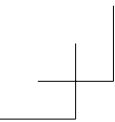

**Care, Maintenance & Cleaning .....21**  
**Potential for Electromagnetic Interference.....23**  
**Troubleshooting.....24**  
**Specifications .....25**  
**5 Year Limited Warranty.....26**

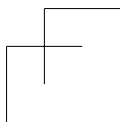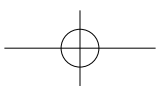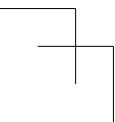
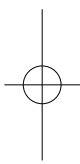
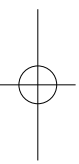






## IMPORTANT PRODUCT NOTICES AND SAFETY INSTRUCTIONS

When using your blood pressure monitor, basic precautions should always be followed. Please read and follow all instructions and warnings before using this product. Save these instructions for future reference.




- Please note that this is a home healthcare product only and it is not intended to serve as a substitute for the advice of a physician or medical professional.
- This device uses the oscillometric method to measure systolic and diastolic blood pressure as well as heart rate.
- Do not use this device for diagnosis or treatment of any health problem or disease. Measurement results are for reference only. Consult a healthcare professional for interpretation of pressure measurements. Contact your physician if you have or suspect any medical problem. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.
- This device may have difficulty determining the proper blood pressure for pregnant women and for users with diabetes, poor circulation of blood, kidney problems or for users who have suffered from a stroke.

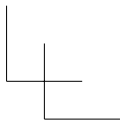
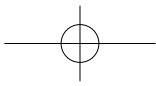
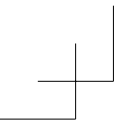


- Consult your physician before measuring blood pressure at the wrist if you have any of the following conditions: Severe hypertension, severe diabetes, severe arteriosclerosis, severe kidney disease or vascular disease that may compromise circulation.
- The pulse display is not suitable for checking the frequency of heart pacemakers.
- Electromagnetic interference: The device contains sensitive electronic components. Avoid strong electrical or electromagnetic fields in the direct vicinity of the device (e.g. mobile telephones, microwave ovens). These may lead to temporary impairment of measurement accuracy.
- Use this blood pressure monitor only for its intended use.
- Do not wrap the cuff around body parts other than your wrist.
- Not for use by or on persons under the age of 18.
- Use only 1.5V AAA alkaline batteries for power supply.

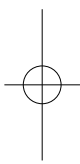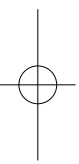

Blood pressure measurements determined with this device are equivalent to those obtained by a trained observer using the cuff/stethoscope auscultatory method, within the limits prescribed by the American National Standard, *Manual, electronic, or automated sphygmomanometers*.

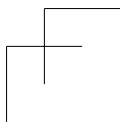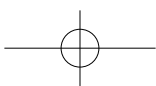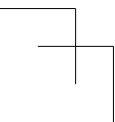

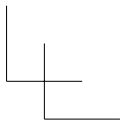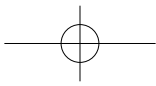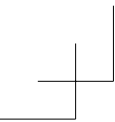

## ABOUT BLOOD PRESSURE

### ***What is Blood Pressure?***

Blood pressure is the pressure exerted on the artery walls while blood flows through the arteries. The pressure measured when the heart contracts and sends blood out of the heart is systolic (highest) blood pressure. The pressure measured when the heart dilates with blood flowing back into the heart is called diastolic (lowest) blood pressure.






### ***Why Measure Your Blood Pressure?***



Among today's various health problems, those associated with high blood pressure are very common. High blood pressure dangerously correlates with cardiovascular diseases. Therefore, blood pressure monitoring is important for identifying those at risk.

## BLOOD PRESSURE STANDARD

The table on the following page contains defined levels for hypertension that are publicly available from the National Heart Lung and Blood Institute at the U.S. National Institutes of Health (NIH) ([http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Hbp/HBP\\_WhatIs.html](http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Hbp/HBP_WhatIs.html)). Users can compare their own blood pressure readings against these defined levels to determine if they may be potentially at increased risk.



This table is applicable to most adults aged 18 and older.

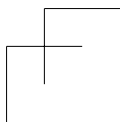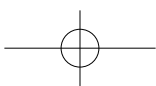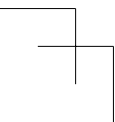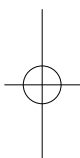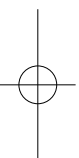

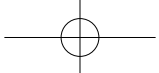

Blood pressure tends to go up and down, even in people who normally don't have high readings. If your numbers stay above the "normal" range most of the time, you may be at increased risk and should consult your physician.

Category	Systolic (mmHg)		Diastolic (mmHg)
Normal	Less than 120	and	Less than 80
Prehypertension	120-139	or	80-89
High Blood Pressure			
Stage 1	140-159	or	90-99
Stage 2	160 or higher	or	100 or higher

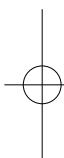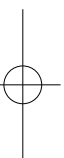

Although one can easily find where their own blood pressure readings fall on this table, this monitor comes equipped with a Risk Category Index that automatically compares each reading to the defined levels and provides a helpful cue if your reading falls into one of the stages that could potentially indicate increased risk. For more information, refer to the RISK CATEGORY INDEX section of this manual.

Please note that cues provided by this monitor are only intended to assist you in using this table. The table and cues are only provided for convenience to help you understand your non-invasive blood pressure reading as it relates to the NIH information. They are not a substitute for a medical examination by your physician. It is important for you to consult with your physician regularly. Your physician will tell you your normal blood pressure range as well as the point at which you may actually be considered to be at risk.




## HOW THIS BLOOD PRESSURE MONITOR WORKS

This monitor uses innovative technology to detect your systolic pressure, diastolic pressure and pulse. This technology enables the monitor to automatically inflate and deflate at the appropriate level for each individual. With one touch of a button, the cuff will automatically inflate to block the blood flow through your artery. Next, the deflation process starts. Please note that any muscle movement during inflation or deflation will cause measurement error. When measurement is complete, the monitor will display your systolic pressure, diastolic pressure, and pulse readings.

The monitor automatically finds where your measurement results fall on the NIH's National Heart Lung and Blood Institute's table and provides a cue if your reading falls into one of the stages that could potentially indicate increased risk. For more information, refer to the RISK CATEGORY INDEX section of this manual.




## NAME/FUNCTION OF EACH PART

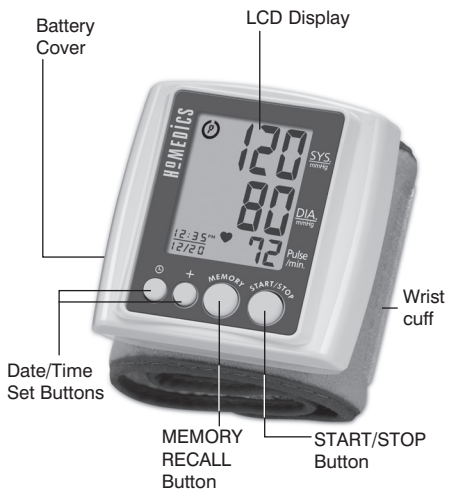


### Other Accessories (not included):

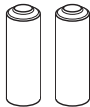


2 "AAA" size, 1.5V  
alkaline batteries  
(batteries not included)

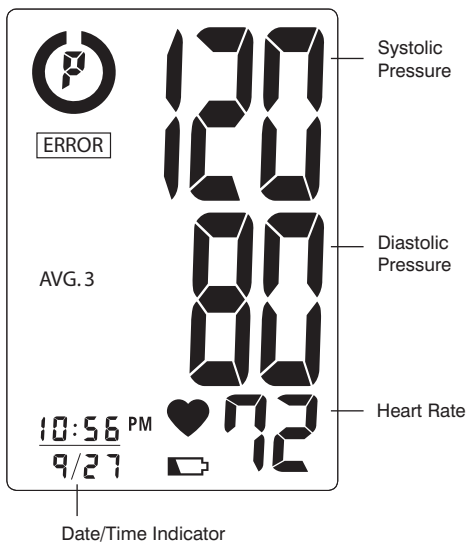

## DISPLAY EXPLANATIONS



## Display Symbols:




	<b>Weak Battery Symbol:</b> Appears when batteries should be replaced.
	<b>Pulse Symbol:</b> Shows the heart rate per minute.
AVG. 3	<b>Memory Average:</b> Displays average of last 3 readings
	<b>Risk Category Index:</b> For more information, refer to the RISK CATEGORY INDEX section of this manual.

If **ERROR** and any of the following letters and numbers appear in the area that systolic pressure should be displayed, an error has occurred with your reading. See TROUBLESHOOTING section of this manual for more information.

<b>EE</b>	<b>Measurement Error:</b> Wrap the cuff correctly and keep wrist steady during measurement. Measure again.
<b>E1</b>	<b>Air Circuit Abnormality:</b> Measure again.
<b>E2</b>	<b>Pressure Exceeding 300 mmHg:</b> Switch the unit off to clear, then measure again.
<b>E3</b>	<b>Error Determining Measurement Data:</b> Measure again.
<b>EP</b>	<b>System Error:</b> Measure again.

## INSTALLING BATTERIES

1. The battery cover is located along the left side of the monitor. Remove battery cover by pressing down and pulling away from the monitor.
2. Install batteries according to the polarity indications inside the compartment (as shown in fig. 2). **Battery Type: 2 Alkaline LR03 (AAA) size**
3. Replace the cover by inserting it back into place.

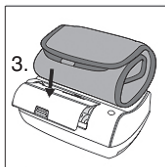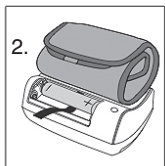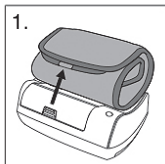






### Replace the batteries if:


- The weak battery symbol appears on the display.
- Nothing appears on the display when the power is switched on.

Replace all batteries at one time (as simultaneous set). Use only 1.5V AAA alkaline batteries. Remove batteries when unit is not in use for extended periods of time. Date and time will need to be reset if batteries are removed or replaced. Clean contacts on battery and in battery compartment with a soft dry cloth each time you install batteries.

**Note:** Batteries are hazardous waste. Do not dispose of them together with the household garbage.

## DATE & TIME SET PROCEDURE

1. To adjust the date/time, press the **SET button** .  
The display will show a blinking number showing the MONTH.
2. Change the MONTH by pressing  the **button**. Each press will increase the number by one in a cycling manner. Press the **SET button**  again to confirm the entry, and the screen will show a blinking number representing the DAY of the month.
3. Change the DAY and TIME as described in Step 2 above, using the  **button** to change the numbers and the **SET button**  to confirm the entries.

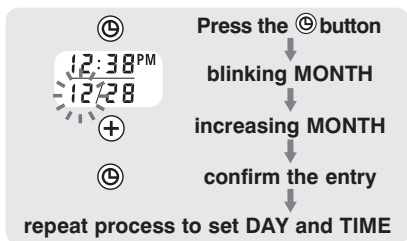

## APPLYING THE CUFF

1. Remove all watches, wrist jewelry, etc. prior to attaching the wrist monitor. Clothing sleeves should be rolled up and the cuff should be wrapped around bare skin for correct measurements.
2. Apply cuff to left wrist with palm facing up as shown in Fig. A.
3. Make sure the edge of the cuff is about  $1/4'' \sim 1/2''$  (1 cm) from the palm as shown in Fig. B.
4. In order to ensure accurate measurements, fasten the hook and loop strap securely around your wrist so there is no extra space between the cuff and the wrist as shown in Fig. C. If the cuff is not wrapped tight enough, the measurement values will not be accurate.
5. If your physician has diagnosed you with poor circulation in your left arm, place the cuff around your right wrist as shown in Fig. D.

**Note:** If it is not possible to use the cuff on your left wrist,

Fig. A



Fig. B



Fig. C



Fig. D



it can also be used on your right wrist. However, all measurements should be made using the same wrist.

## CORRECT MEASUREMENT POSTURE

1. Place your elbow on a table so that the cuff is at the same level as your heart as shown in Fig. A.

Relax your entire body, especially between your elbow and fingers.

**Note:** Your heart is located slightly below your armpit.

2. If the cuff is not at the same level as your heart or if you cannot keep your arm completely still throughout the reading, use a soft object such as a folded towel to support your arm as shown in Fig. B.
3. Turn your palm upwards.
4. Sit upright in a chair, and take 5-6 deep breaths.

**Note:** Avoid leaning back while the measurement is being taken as shown in Fig. C.

Fig. A




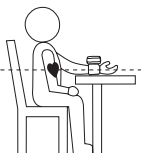


Fig. B



Fig. C

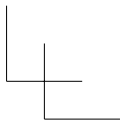
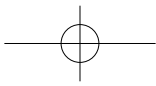


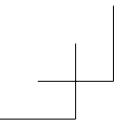




## MEASUREMENT PROCEDURE

### Important Notes:

- Position the monitor at the same level as your heart during measurement to ensure accurate readings.
- Blood pressure changes with every heartbeat and is in constant fluctuation throughout the day.
- Blood pressure measurement can be affected by the position of the user, his or her physiologic condition and other factors. For greatest accuracy, wait 1 hour after exercising, bathing, eating, drinking beverages with alcohol or caffeine, or smoking to measure blood pressure.
- Before measurement, it is suggested that you sit quietly for 15 minutes as measurements taken during a relaxed state will have greater accuracy. You should not be physically tired or exhausted while taking a measurement.
- During the measurement, do not talk or move your arm or hand muscles.
- For additional notes regarding your blood pressure measurement, refer to the IMPORTANT NOTES REGARDING YOUR BLOOD PRESSURE MEASUREMENT section of this manual.

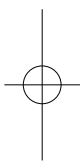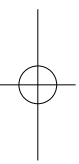


If you are using this blood pressure monitor for the first time, please remove the protective film from the screen.

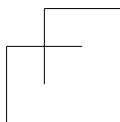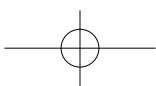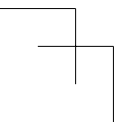





1. With the cuff wrapped around your wrist, press the **START/STOP** button. Do not inflate the cuff unless it is wrapped around your wrist. All digits will light up, checking the display functions. The checking procedure will be completed after about 2 seconds.

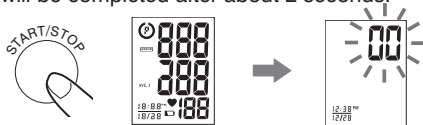

2. After all symbols disappear, the display will show a blinking “00”. The monitor is “**Ready to Measure**” and will **automatically** inflate the cuff to begin measurement. The cuff will then begin deflating as measurement continues.

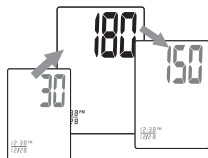

**Note:** The monitor will re-inflate automatically if the system detects that your body requires more pressure for measurement.

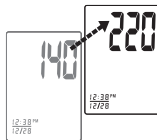

3. When the measurement is completed, the cuff will deflate entirely and systolic pressure, diastolic pressure and pulse will be shown simultaneously on the LCD screen. **The measurement is then automatically stored into memory.**



**Note:**

- This monitor automatically turns off approximately **1 minute** after last operation. You may also press the **START/STOP button** to turn the unit off.
- To interrupt the measurement, you may press the **START/STOP button** (recommended) or the **MEMORY**, or **DATE/TIME SET (Ⓢ)** buttons. The cuff will deflate immediately after a button is pressed.

**RISK CATEGORY INDEX**

This monitor comes equipped with a Risk Category Index that automatically compares each reading to defined levels established by the U.S. National Institutes of Health's (NIH) National Heart Lung and Blood Institute as described earlier in this manual, and provides a helpful cue if your reading falls into

one of the stages that could potentially indicate increased risk. No cue is given if the reading falls in the normal range as defined by NIH. Please note that cues provided by this monitor are only intended to assist you in using this table. The table and cues are only provided for convenience to help you understand your non-invasive blood pressure reading as it relates to the NIH information. They are not a substitute for a medical examination by your physician. It is important for you to consult with your physician regularly. Your physician will tell you your normal blood pressure range as well as the point at which you may actually be considered to be at risk.



Stage 2 Hypertension



Prehypertension



Stage 1 Hypertension


Normal (No Symbol)

## RECALLING VALUES FROM MEMORY


1. Press the **MEMORY** button to access the memory.



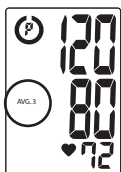

2. The monitor will first display the calculated average applied to the last 3 memories (“AVG. 3”).

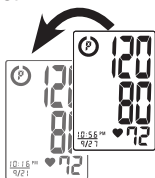


3. Every new press of the **MEMORY** button will recall a previous reading. The latest reading will be recalled first.





## CLEARING VALUES FROM MEMORY




Press and hold the   buttons at the same time while in memory recall mode and the data will be erased automatically.

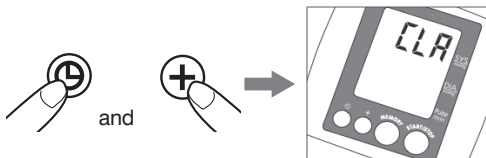








## IMPORTANT NOTES REGARDING YOUR BLOOD PRESSURE MEASUREMENT

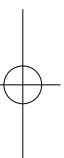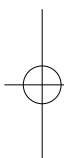- Take your reading in a comfortable environment as measurements can be affected by hot or cold temperatures. Take your blood pressure at normal body temperature.
  - Do not move or talk during measurement as this can elevate readings.
  - Do not move or cross legs during measurement. Keep feet flat on floor.
  - Do not touch cuff or monitor during measurement procedure.
  - It is suggested that you take your measurements at the same time each day and use the same wrist for consistency.
  - Users should wait a minimum of 5 minutes before taking additional measurements. More time may be necessary depending upon your physiology.
  - **The measurement results that users receive are for reference only. If users have any blood pressure concerns, please consult a physician.**
  - **Once inflation reaches 300 mmHg, the unit will deflate automatically for safety reasons.**
  - **This device may have difficulty determining the proper blood pressure for pregnant women and for users with diabetes, poor circulation of blood, kidney problems or for users who have suffered from a stroke.**
- 
- 

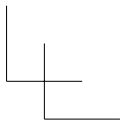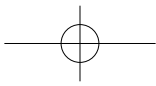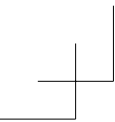

## CARE, MAINTENANCE & CLEANING

- Clean the blood pressure monitor body and cuff carefully with a slightly damp, soft cloth. Do not press. Do not wash cuff or use chemical cleaner on it. Never use thinner, alcohol or petrol (gasoline) as cleaner.
- Leaky batteries can damage the unit. Remove the batteries when the unit will not be used for a long time.
- Follow local ordinances and recycling instructions regarding disposal of the device and device components, including batteries.
- If the unit is stored near freezing, allow it to acclimate to room temperature before use.
- This blood pressure monitor is not field serviceable. You should not use any tool to open the device nor should you attempt to adjust anything inside the device. If you have any problems with this device, please contact HoMedics Consumer Relations (contact information on WARRANTY page).
- Do not immerse the unit in water as this will result in damage to the unit.
- Do not subject the monitor and cuff to extreme temperatures, humidity, moisture, and direct sunlight. Protect from dust.
- Do not fold the cuff tightly.
- Do not disassemble the monitor or cuff. If in need of repair, refer to the warranty section of this manual.

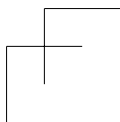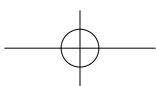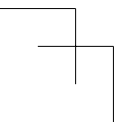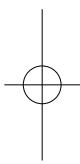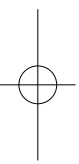



- Do not subject the monitor to extreme shocks (do not drop on floor).
- Do not inflate the cuff unless wrapped around wrist.
- Do not wrap the cuff around body parts other than your wrist.
- Do not drop or insert any object into any opening.
- This monitor may not meet its performance specifications if stored or used outside of these temperature and humidity ranges:

**Storage/Transportation Environment**

Temperature:

-13°F ~ 158°F (-25°C ~ 70°C)

Relative Humidity:  
less than 93% R.H.

**Operating Environment**

Temperature:

41°F ~ 104°F (5°C ~ 40°C)

Relative Humidity:  
15% ~ 93% R.H.

## POTENTIAL FOR ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE

To avoid inaccurate results caused by electromagnetic interference between electrical and electronic equipment, do not use the device near a cell phone or microwave oven.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



**NOTE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.




## TROUBLESHOOTING

If any abnormality arises during use, please check the following points:

SYMPTOMS	POSSIBLE CAUSES	CORRECTION
Unit does not turn on when the <b>START/STOP button</b> is pushed.	Batteries have run down.	Replace them with two new AAA alkaline batteries.
	Battery polarities have been positioned incorrectly.	Re-insert the batteries in the correct positions.
EE measurement error symbol shown on display or the blood pressure value is displayed excessively low (or high).	Cuff has been placed incorrectly.	Wrap the cuff properly so that it is positioned correctly.
	Did you talk or move during measurement?	Keep wrist steady during measurement.
	Shaking of the wrist with the cuff on.	Measure again.
E1 error symbol shown on display	Air circuit abnormality.	Measure again.
E2 error symbol shown on display	Inflation pressure exceeding 300 mmHg.	Switch the unit off, then measure again.
E3 error symbol shown on display	Error determining measurement data.	Measure again.
EP error symbol shown on display	System error.	Measure again.

**Note:** If the unit still does not work, contact HoMedics Consumer Relations. Under no circumstance should you disassemble or attempt to repair the unit by yourself. Contact information for HoMedics Consumer Relations Department can be found on the warranty page.

## SPECIFICATIONS

<b>Power Source:</b>	Two 1.5V DC (AAA) Alkaline batteries (not included)
<b>Measurement Method:</b>	Oscillometric
<b>Measurement Range:</b>	Pressure: 40~280 millimeters Mercury (mmHg) Pulse: 40~199 beats/minute
<b>Accuracy:</b>	Pressure: $\pm 3$ mmHg Pulse: $\pm 5\%$ of reading
<b>Pressure Sensor:</b>	Semi-conductor
<b>Inflation:</b>	Pump driven
<b>Deflation:</b>	Automatic Pressure release valve
<b>Memory Capacity:</b>	99 memories
<b>Auto-shut-off:</b>	1 minute after last button operation
<b>Operation Environment:</b>	Temperature: 41°F~104°F (5°C ~40°C) Relative Humidity: 15% ~ 93%
<b>Storage/Transportation Environment:</b>	Temperature: -13°F~158°F (-25°C~70°C) Relative Humidity: less than 93%
<b>Weight:</b>	0.25 lbs (114.6 g) (without batteries)
<b>Wrist Circumference:</b>	5.3" - 7.7" (13.5cm - 19.5cm)
<b>Dimensions:</b>	2.83" (L) x 2.76" (W) x 1.08" (H) 72mm(L) x 70mm(W) x 27.5mm(H)
<b>Accessories:</b>	Instruction manual
	Internally Powered equipment Type BF Equipment IPx0-No special protection against the ingress of water Not suitable for use in presence of flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide. Continuous operation with short-time loading.

**Note:** These specifications are subject to change without notice.



# HoMEDICS®

**For service or repair, do not return this unit to the retailer. Contact HoMedics Consumer Relations at:**

**Email:**  
**cservice@**  
**homedics.com**

**Phone:**  
**1-800-466-3342**  
**Business Hours:**  
**8:30am-7pm ET**  
**Monday-Friday**



**Distributed by**  
**HoMEDICS®**

HoMedics, LLC.  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township,  
MI 48390

Printed in China

## LIMITED FIVE YEAR WARRANTY


HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of five years from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This blood pressure monitor meets the simulated measurement cycles test requirement per EN1060-3, part 8.10. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, contact a Consumer Relations representative by telephone at 1-800-466-3342 for assistance. Please make sure you have the model number of the product available.



HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturers recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.


THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF

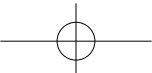

**5** year  
limited warranty

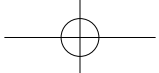


THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.



This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.


This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit:  
[www.homedics.com](http://www.homedics.com)



**HoMedics® is a registered trademark of HoMedics, LLC.**  
**© 2009-2013 HoMedics, LLC. All rights reserved.**

**IB-BPW040C**  
**P/N: 323102177 VER:001**

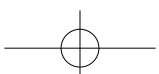

**5** year  
limited warranty

# HOMEDICS®

## Monitor automático de presión sanguínea para la muñeca



Tómese un momento ahora

**Registre**

su producto en:

[www.homedics.com/register](http://www.homedics.com/register)

Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que desee en el futuro.

BPW-040  
Ver. C

**5 años**  
garantía limitada



## ÍNDICE

### **INFORMACIÓN INICIAL:**

<b>Avisos importantes del producto e instrucciones de seguridad .....</b>	<b>31</b>
<b>Sobre la presión sanguínea .....</b>	<b>33</b>
<b>Estándar de presión sanguínea .....</b>	<b>33</b>
<b>Cómo funciona este monitor de presión sanguínea .....</b>	<b>35</b>



### **INFORMACIÓN DE USO:**



<b>Nombre/Función de cada pieza .....</b>	<b>36</b>
<b>Explicaciones de la pantalla .....</b>	<b>37</b>
<b>Instalación de las pilas .....</b>	<b>39</b>
<b>Procedimiento de configuración de fecha y hora .....</b>	<b>40</b>
<b>Aplicación del brazalete .....</b>	<b>41</b>
<b>Postura correcta para la medición .....</b>	<b>42</b>
<b>Procedimiento de medición .....</b>	<b>43</b>
<b>Índice de Categoría de Riesgo .....</b>	<b>47</b>
<b>Cómo recuperar los valores de la memoria .....</b>	<b>48</b>
<b>Cómo borrar los valores de la memoria .....</b>	<b>49</b>



<b>Notas importantes con respecto a las mediciones de presión sanguínea .....</b>	<b>49</b>
<b>Cuidado, mantenimiento y limpieza.....</b>	<b>51</b>
<b>Potencial de interferencia con electromagnética .....</b>	<b>53</b>
<b>Diagnóstico y resolución de problemas .....</b>	<b>54</b>
<b>Especificaciones.....</b>	<b>55</b>
<b>5 Años Garantía limitada.....</b>	<b>56</b>






## AVISOS IMPORTANTES DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su monitor de presión sanguínea, debe seguir siempre las precauciones básicas. Sírvase leer y seguir todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura.

- Observe que éste es un producto doméstico de cuidado de la salud únicamente y no está diseñado para servir como sustituto de los consejos de un médico ni profesional médico.
- Este dispositivo utiliza el método oscilométrico para medir la presión arterial sistólica y diastólica, y la frecuencia cardíaca.
- No utilice este dispositivo para el diagnóstico ni tratamiento de ningún problema de salud ni enfermedad. Los resultados de medición son de referencia únicamente. Consulte a un profesional del cuidado de la salud para conocer la interpretación de las mediciones de la presión. Póngase en contacto con su médico si tiene un problema médico o sospecha que lo tiene. No cambie sus medicinas sin el consejo de su médico o profesional de la salud.
- Este dispositivo puede tener dificultad para determinar la correcta presión sanguínea para mujeres embarazadas y para usuarios con diabetes, mala circulación, trastornos renales o usuarios que han sufrido una apoplejía.
- Consulte con su médico antes de medirse







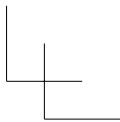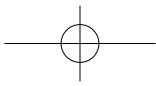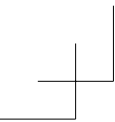

la presión sanguínea en la muñeca si tiene alguna de las siguientes afecciones: hipertensión grave, diabetes grave, arteriosclerosis grave, enfermedad renal grave o enfermedad vascular que pueda afectar la circulación.

- La pantalla de pulso no es adecuada para verificar la frecuencia de los marcapasos.
- Interferencia electromagnética: el dispositivo contiene componentes electrónicos sensibles. Evite los campos eléctricos o electromagnéticos fuertes cercanos al dispositivo (por ejemplo, teléfonos celulares, hornos de microondas). Éstos pueden causar la imposibilidad temporal de medir con precisión.
- Utilice el monitor de presión sanguínea únicamente para el uso para el cual fue diseñado.
- No coloque el brazalete en otra parte de su cuerpo que no sea la muñeca.
- No apto para ser usado por o con personas menores de 18 años.
- Solo use pilas alcalinas AAA de 1.5V como fuente de energía.

Las mediciones de la presión sanguínea que se determinen con este dispositivo son equivalentes a las obtenidas por un observador capacitado que use el método de auscultación con brazalete/estetoscopio, dentro de los límites prescritos por el Estándar nacional de los EE.UU., *Esfigmomanómetro manual, electrónico o automatizado*.

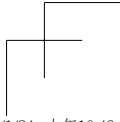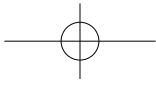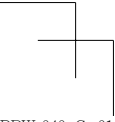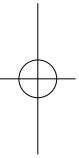



## SOBRE LA PRESIÓN SANGUÍNEA

### ***¿Qué es la presión sanguínea?***

La presión sanguínea es la presión que se ejerce en las paredes de la arteria cuando la sangre fluye por las arterias. La presión medida cuando el corazón se contrae y sale la sangre es la presión sanguínea sistólica (la mayor). La presión medida cuando el corazón se dilata y entra la sangre se llama presión sanguínea diastólica (la menor).

### ***¿Por qué medir la presión sanguínea?***

Entre los varios problemas de salud de hoy, los asociados con la hipertensión son muy comunes. La hipertensión se relaciona de manera peligrosa con las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, controlar la presión sanguínea es importante para identificar a las personas en riesgo.

## ESTÁNDAR DE PRESIÓN SANGUÍNEA

La tabla incluida en la siguiente página contiene niveles definidos de hipertensión, disponibles en forma pública en el National Heart Lung and Blood Institute en los National Institutes of Health (NIH) de los EE.UU. ([http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Hbp/HBP\\_WhatIs.html](http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/Hbp/HBP_WhatIs.html)).

Los usuarios pueden comparar sus propias lecturas de presión sanguínea con estos niveles definidos establecidos para determinar si es posible que corran un mayor riesgo.

Esta tabla se aplica a la mayoría de los adultos mayores de 18 años.

La presión sanguínea tiende a subir y bajar, incluso en personas que normalmente no tienen lecturas altas. Si sus resultados permanecen por encima del rango “normal” la mayoría del tiempo, es posible que corra un riesgo mayor y debería consultar a su médico.

Categoría	Sistólica (mmHg)		Diastólica (mmHg)
Normal	menor que 120	Y	menor que 80
Prehipertensión	120-139	0	80-89
Hipertensión			
Etapas 1	140-159	0	90-99
Etapas 2	160 o mayor	0	100 o mayor

Si bien uno puede encontrar fácilmente en esta tabla en dónde está su propia lectura de la presión sanguínea, este monitor viene equipado con un Índice de categoría de riesgo que compara automáticamente cada lectura a estos niveles definidos y brinda una guía útil si su lectura queda dentro de una de las etapas que posiblemente podrían indicar un mayor riesgo. Vea la sección **ÍNDICE DE CATEGORÍA DE RIESGO** de este manual para obtener más información.

Nota que las guías que proporciona este monitor están destinadas únicamente para asistirlo en el uso de esta tabla. La tabla y las guías se proporcionan únicamente por practicidad, para ayudarle a entender su lectura no invasiva de presión arterial según se relaciona con la información de los NIH. No son un sustituto de un examen médico realizado por su médico. Es importante que consulte con su médico regularmente. Su médico le dirá su rango normal de presión sanguínea además del punto en el que usted puede ser considerado realmente en riesgo.



## CÓMO FUNCIONA ESTE MONITOR DE PRESIÓN SANGUÍNEA

Este monitor utiliza tecnología innovadora para detectar su presión sistólica, presión diastólica y de pulso. Esta tecnología permite que el monitor infle y desinfe automáticamente al nivel apropiado para cada persona. Al presionar un botón, el brazalete se inflará automáticamente para bloquear la circulación de sangre a través de la arteria. Luego, comienza el proceso de desinflado. Note por favor que cualquier movimiento de músculos durante el proceso de inflar o desinflar causa un error en la medición. Cuando la medición esté completa, el monitor mostrará lecturas de presión sistólica, presión diastólica y de pulso.


El monitor encuentra automáticamente en dónde se encuentran sus resultados en la tabla del National Heart Lung and Blood Institute en los National Institutes of Health (NIH) y brinda una guía si su lectura entra en una de las etapas que podría indicar un mayor riesgo. Vea la sección **ÍNDICE DE CATEGORÍA DE RIESGO** de este manual para obtener más información.

## NOMBRE/FUNCIÓN DE CADA PIEZA




### Otros Accesorios (no incluidos):

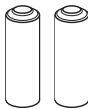


2 pilas alcalinas  
"AAA" de 1,5 V



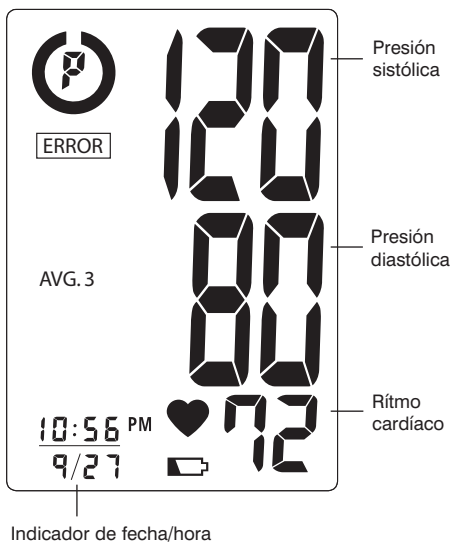




## EXPLICACIONES DE LA PANTALLA



## Símbolos de la pantalla:


	<b>Símbolo de pilas bajas:</b> aparece cuando tiene que cambiar las pilas.
	<b>Símbolo de pulso:</b> muestra el ritmo cardíaco por minuto.
AVG. 3	<b>Promedio de memoria:</b> muestra un promedio de al menos 3 lecturas.
	<b>Índice de Categoría de Riesgo:</b> Vea la sección ÍNDICE DE CATEGORÍA DE RIESGO de este manual para obtener más información.

Si aparece alguno de los siguientes números o letras en el área donde se debe mostrar la presión sistólica con [ERROR], ha ocurrido un error en la lectura. Vea la sección DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS de este manual para obtener más información.


	<b>Error de medición:</b> Vuelva a colocarse el brazalete y mantenga la muñeca quieta durante la medición. Mida nuevamente.
	<b>Irregularidad en el circuito de aire:</b> Mida otra vez.
	<b>Presión superior a 300 mmHg:</b> Apague la unidad, luego vuelva a medir.
	<b>Error al determinar datos de medición:</b> Mida nuevamente.
	<b>Error del sistema:</b> Repita la medición.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. La tapa de la pila está ubicada a lo largo del lado del monitor. Retire la tapa de la batería presionando hacia abajo y en dirección opuesta al monitor.

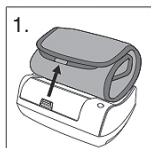


2. Instale la baterías siguiendo las indicaciones de polaridad que se encuentran dentro del compartimiento (como se indica en la figura 2).

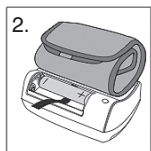

**Tipo de pila: 2 pilas alcalinas LR03 tamaño (AAA)**

3. Vuelva a colocar la tapa, insertándola nuevamente en su lugar.

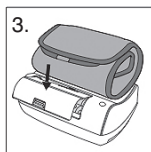

### Reemplace las pilas si:

- El símbolo de pilas bajas aparece en la pantalla.
- No aparece nada en la pantalla cuando enciende el dispositivo.

Cambie todas las pilas al mismo tiempo (como parte de un solo juego, no por separado). Solo use pilas alcalinas AAA de 1.5V. Saque las pilas cuando la unidad no esté en uso durante mucho tiempo. Si se quitan o sustituyen las baterías, es necesario reingresar




fecha y hora. Limpie los contactos de la pila y del compartimiento para pilas con un paño suave cada vez que instale pilas.

**Nota:** Las pilas son desechos peligrosos. No las deseché junto con la basura doméstica.

## PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

1. Para ajustar la fecha / hora, pulse el **botón** **SET (ajuste)**. La pantalla mostrará una luz que muestra el número de MES.
2. Cambie el MES presionando el **botón** **+**. Cada vez que lo presione aumentará en uno el número de manera cíclica. Presione el **botón** **SET (ajuste)** nuevamente para confirmar la definición, y la pantalla mostrará un número intermitente que representa el DÍA del mes.
3. Cambie el DÍA y la HORA según lo que se describe en el Paso 2 anterior, usando el **botón** **+** para cambiar los números y el **botón** **SET (ajuste)** para confirmar las definiciones.

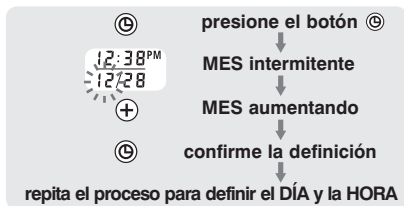

## APLICACIÓN DEL BRAZALETE

1. Quítese el reloj, las alhajas que tenga en la muñeca, etc., antes de colocar el monitor para la muñeca. Deberá remangarse si tiene mangas largas y deberá colocar el brazalete alrededor de la piel para obtener una medición correcta.
2. Aplique el brazalete a la muñeca izquierda con la palma de la mano hacia arriba, como se muestra en la Fig. A.
3. Asegúrese de que el borde del brazalete esté a aproximadamente entre  $1/4''$  y  $1/2''$  (1 cm) de la palma de la mano, como se muestra en la Fig. B.
4. A fin de asegurar mediciones precisas, ajuste la tira con velcro en forma segura alrededor de su muñeca para que no haya espacio entre el brazalete y la muñeca, como se muestra en la Fig. C. Si el brazalete no está colocado lo suficientemente apretado, los valores de medición no serán precisos.
5. Si su médico le ha diagnosticado mala circulación en su brazo izquierdo, coloque el brazalete alrededor de su muñeca derecha, como se muestra en la Fig. D.

Fig. A



Fig. B



Fig. C



Fig. D



**Nota:** Si no es posible colocar el brazaletе en la muñeca izquierda, también lo puede colocar en la muñeca derecha. Sin embargo, todas las mediciones deben realizarse usando la misma muñeca.

## POSTURA CORRECTA PARA LA MEDICIÓN

1. Coloque el codo sobre una mesa de modo que el brazaletе quede al mismo nivel que su corazón, como se muestra en la Fig. A.

Relaje todo su cuerpo, especialmente entre el codo y los dedos.

**Nota:** Su corazón está ubicado ligeramente debajo de su axila.

2. Si el brazaletе no está al mismo nivel que su corazón o si no puede mantener su brazo completamente quieto durante la lectura, utilice un objeto blando, como una toalla doblada, para apoyar el brazo, como se muestra en la Fig. B.

Fig. A



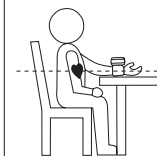


Fig. B

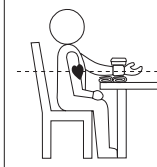

3. Coloque la palma de la mano hacia arriba.
4. Siéntese derecho en una silla y respire profundamente 5 ó 6 veces.

**Nota:** Evite recostarse hacia atrás durante la medición como se muestra en la Fig. C.

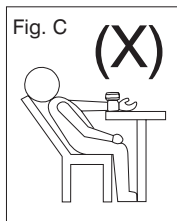

## PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN


### Notas importantes:

- Coloque el monitor al mismo nivel que su corazón durante la medición para asegurar lecturas precisas.
- La presión sanguínea cambia con cada latido del corazón y está en constante fluctuación durante todo el día.
- La medición de la presión sanguínea puede verse afectada por la posición del usuario, sus condiciones fisiológicas y demás factores. Para obtener la mayor precisión en la medición de la presión sanguínea, espere 1 hora después de hacer ejercicio, bañarse, comer, tomar bebidas con alcohol o cafeína o fumar.
- Antes de la medición, se sugiere que se siente tranquilo durante 15 minutos ya que las mediciones realizadas durante un estado relajado tendrán una mayor precisión. No debe estar físicamente cansado ni extenuado cuando realiza la medición.


- Durante la medición, no hable ni mueva los músculos del brazo ni la mano.
- Para las notas adicionales con respecto a la medición de su presión sanguínea vea la sección NOTAS IMPORTANTES CON RESPECTO A LAS MEDICIONES DE PRESIÓN SANGUÍNEA de este manual para obtener más información.

Si usted está usando este monitor de tensión arterial por primera vez, por favor quite la película protectora de la pantalla.


1. Con el brazalete puesto en la muñeca, presione el **botón START/STOP (inicio/parada)**. No infle el brazalete a menos que esté puesto en la muñeca. Todos los dígitos se encenderán para verificar las funciones de la pantalla. El procedimiento de verificación se completará después de aproximadamente 2 segundos.

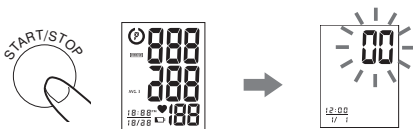

2. Una vez que el símbolo desaparezca, la pantalla mostrará un “00” en forma intermitente. El monitor está “**Listo para medir**” e inflará el brazalete automáticamente para comenzar a medir. El brazalete comenzará a desinflarse a medida que continúa la medición.

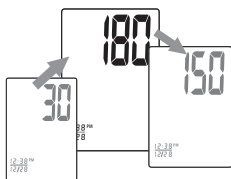

**Nota:** El monitor se volverá a inflar automáticamente si el sistema detecta que su cuerpo precisa más presión para la medición.

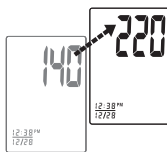

3. Cuando haya finalizado la medición, el brazalete se desinflará completamente y se mostrarán las lecturas de presión sistólica, presión diastólica y pulso simultáneamente en la pantalla LCD. **La medida se almacenará automáticamente en la memoria.**



**Nota:**

1. Este monitor se apaga en forma automática aproximadamente **1 minuto** después de la última operación. También puede presionar el **botón START/STOP (inicio/parada)** para apagar la unidad.
2. Para interrumpir la medición, puede presionar el **botón START/STOP** (recomendado), o los botones Memory (memoria) o de configuración de la fecha y la hora (Ⓢ). El brazalete se desinflará inmediatamente después de presionar el botón.

## ÍNDICE DE CATEGORÍA DE RIESGO

Este monitor viene equipado con un Índice de categoría de riesgo que compara automáticamente cada lectura con los niveles definidos establecido por el National Heart Lung and Blood Institute de los National Institutes of Health (NIH) de EE.UU. como se describió anteriormente en este manual y brinda una guía útil si su lectura entra en una de las etapas que podrían indicar un posible mayor riesgo. No se muestra ninguna guía si la lectura entra en el rango normal según lo definido por los NIH. Note que las guías que proporciona este monitor están destinadas únicamente para asistirlo en el uso de esta tabla. La tabla y las guías se proporcionan únicamente por practicidad, para ayudarle a entender su lectura no invasiva de presión arterial según se relaciona con la información de los NIH. No son un sustituto de un examen médico realizado por su médico. Es importante que consulte con su médico regularmente. Su médico le dirá su rango normal de presión sanguínea además del punto en el que usted puede ser considerado realmente en riesgo.



Etapa 2 de hipertensión



Prehipertensión



Etapa 1 de hipertensión

Normal (sin símbolo)



## CÓMO RECUPERAR LOS VALORES DE LA MEMORIA


1. Presione el **botón MEMORY** para acceder a la memoria.





2. El monitor mostrará primero el promedio calculado aplicado a las últimas 3 memorias ("AVG. 3").

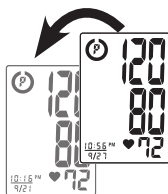


3. Cada vez que presiona el **botón MEMORY** se recuperará una lectura previa. La última lectura será la primera en recuperarse.



## CÓMO BORRAR LOS VALORES DE LA MEMORIA

Presione y mantenga presionados al mismo tiempo los botones   mientras se encuentra en el modo de recuperar memoria y los datos se borrarán automáticamente.

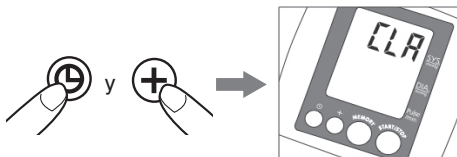

## NOTAS IMPORTANTES CON RESPECTO A LAS MEDICIONES DE PRESIÓN SANGUÍNEA

- Tome su lectura en un entorno cómodo ya que las medidas pueden verse afectadas por las temperaturas calurosas o frías. Tome su presión sanguínea a una temperatura corporal normal.
- No se mueva ni hable durante la medición ya que esto puede elevar las lecturas.
- No mueva ni cruce las piernas durante la medición. Mantenga los pies bien apoyados sobre el piso.
- No toque el brazalete ni el monitor durante el procedimiento de medición.



- Le sugerimos que tome las mediciones todos los días a la misma hora y en la misma muñeca, para establecer una coherencia.
- Los usuarios deberán esperar un mínimo de 5 minutos antes de tomar más mediciones. Dependiendo de su complejión fisiológica, es posible que necesite más tiempo.
- **Los resultados de las mediciones que los usuarios reciben son únicamente para referencia. Si los usuarios tienen inquietudes en cuanto a su presión sanguínea, deberán consultar a un médico.**
- **Una vez que esté inflada a 300 mmHg, la unidad se desinflará automáticamente por motivos de seguridad.**
- **Este dispositivo puede tener dificultad para determinar la correcta presión sanguínea para mujeres embarazadas y para usuarios con diabetes, mala circulación, trastornos renales o usuarios que han sufrido una apoplejía.**



## CUIDADO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Limpie el cuerpo del monitor de presión sanguínea y el brazalete con cuidado con un paño suave, apenas húmedo. No lo apriete. No lave el brazalete ni utilice un limpiador químico para limpiarlo. Nunca utilice diluyentes, alcohol ni petróleo (gasolina) para limpiarlo.
- Las pilas con pérdidas pueden dañar la unidad. Retire las pilas si el producto no se va a utilizar por un largo tiempo.
- Cumpla con las ordenanzas locales y siga las instrucciones de reciclaje relacionadas con el desecho o reciclaje del dispositivo y de los componentes del dispositivo, incluidas las baterías.
- Si la unidad se guarda junto a lugares fríos, permita que se adapte a la temperatura ambiente antes de usarla.
- No podrá realizar por su cuenta el servicio de este monitor de presión sanguínea. No utilice ninguna herramienta para abrir el dispositivo ni intente ajustar nada en el interior del mismo. Si tiene problemas con este dispositivo, póngase en contacto con Relaciones con el Consumidor de HoMedics (encontrará la información de contacto en la página de la GARANTÍA).
- No sumerja la unidad en el agua ya que puede dañarla.
- No exponga el monitor ni el brazalete a temperaturas o humedad extremas ni a la luz



solar directa. Proteja del polvo.

- **No** doble el brazaletes ni el tubo demasiado apretados.
- **No** desarme el monitor ni el brazaletes.  
Si alguno de los componentes necesita reparación, consulte la sección de la garantía de este manual.
- **No** esponga el monitor a golpes extremos (no lo deje caer al suelo).
- **No** infle el brazaletes a menos que esté puesto en la muñeca.
- **No** coloque el brazaletes en otra parte de su cuerpo que no sea la muñeca.
- **No** lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- Este monitor puede no cumplir con sus especificaciones de rendimiento si se guarda o se utiliza fuera de estos rangos de temperatura y humedad:

**Ambiente para guardar/transporte la unidad**

Temperatura:  
-13°F ~ 158°F (-25°C ~ 70°C)  
Humedad:  
Menos de 93% HR

**Ambiente de funcionamiento**

Temperatura:  
41°F ~ 104°F (5°C ~ 40°C)  
Humedad:  
15%-93% HR

## POTENCIAL DE INTERFERENCIA CON RADIO/TELEVISIÓN

Para evitar resultados incorrectos provocados por la interferencia electromagnética entre los equipos eléctricos y electrónicos, no use el dispositivo cerca de un celular o un horno microondas.



Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, inclusive la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: el fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión provocada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha observado que cumple con los límites para un dispositivo de Clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia nociva en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantías de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia nociva en la recepción de radio o televisión, que puede detectarse encendiendo y apagando el equipo, aconsejamos al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de otro circuito donde no esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.


## DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece alguna anomalía durante el uso, sírvase verificar los siguientes puntos:

SÍNTOMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
La unidad no se enciende cuando presiono el <b>botón START/STOP (COMENZAR/DETENER)</b> .	Se han acabado las pilas.	Cambie por dos pilas AAA alcalinas nuevas.
	Los polos de las pilas no se han colocado correctamente.	Vuelva a colocar las pilas en la posición correcta.
Aparece el símbolo de error de medición EE en la pantalla o el valor de presión sanguínea mostrado es excesivamente bajo (o alto).	El brazalete no se ha colocado correctamente.	Envuelva el brazalete adecuadamente para que pueda colocarse en forma correcta.
	¿Habló o se movió durante la medición?	Mantenga el brazo firme durante la medición. Mida nuevamente.
	Sacudió la muñeca con el brazalete colocado.	
Aparece el símbolo de error E1 en la pantalla	Irregularidad en el circuito de aire.	Mida nuevamente.
Aparece el símbolo de error E2 en la pantalla	La presión de inflado excede los 300 mmHg.	Apague la unidad, luego vuelva a medir.
Aparece el símbolo de error E3 en la pantalla	Error al determinar datos de medición.	Mida nuevamente.
Aparece el símbolo de error EP en la pantalla.	Error del sistema.	Mida nuevamente.

**Nota:** Si la unidad aún sigue sin funcionar, póngase en contacto con Relaciones con el Consumidor de HoMedics. Bajo ningún concepto deberá desarmar ni intentar reparar la unidad por su cuenta. Podrá encontrar la información de contacto del Departamento de Relaciones con el Consumidor de HoMedics en la página de garantía.

## ESPECIFICACIONES

<b>Fuente de energía:</b>	Dos pilas alcalinas (AAA) de 1.5 V CC (no incluidas)
<b>Método de medición:</b>	Oscilométrico
<b>Rango de medición:</b>	Presión: 40~280 milímetros de mercurio (mmHg) Pulso: 40~199 latidos/minuto
<b>Precisión:</b>	Presión: $\pm 3$ mmHg Pulso: $\pm 5\%$ de la lectura
<b>Sensor de presión:</b>	Semiconductor
<b>Inflado:</b>	Por bombeo
<b>Desinflado:</b>	Válvula de liberación de presión automática
<b>Capacidad de memoria:</b>	99 memorias
<b>Apagado automático:</b>	1 minuto después de haber presionado algún botón por última vez
<b>Ambiente de funcionamiento:</b>	Temperatura: 41 °F~104 °F (5 °C~40 °C) Humedad relativa: 15% ~ 93%
<b>Ambiente/transporte para guardar:</b>	Temperatura: -13 °F~158 °F (-25 °C~70 °C) Humedad relativa: menos de 93%
<b>Peso:</b>	0,25 lbs (114,6 g) (sin pilas)
<b>Circunferencia de la muñeca:</b>	5,3" - 7,7" (13,5 cm - 19,5 cm)
<b>Accessories:</b>	Manual de instrucciones
<b>Dimensiones:</b>	2,83" (de largo) x 2,76" (de ancho) x 1,08" (de altura) 72 mm (de largo) x 70 mm (de ancho) x 27,5 mm (de altura)
	Equipo con alimentación interna Equipo tipo BF IPx0 - No presenta protección especial contra la entrada de agua. No es adecuado para uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nítrico. Funcionamiento continuo con poco tiempo de carga.

**Nota:** Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





# HOMEDICS®

**Por servicio o reparación,  
no devuelva esta unidad al  
distribuidor. Póngase en  
contacto con Relaciones con  
el Consumidor de HoMedics  
por el:**

**Correo electrónico:**  
cservice@  
homedics.com

**Teléfono:**  
**1-800-466-3342**  
**Horario comercial:**  
**8:30 am a 7pm Hora del Este**  
**De lunes a viernes**



**Distribuido por**  
**HOMEDICS®**

HoMedics, LLC.  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township,  
MI 48390

Impreso en China

## **GARANTÍA LIMITADA POR CINCO AÑOS**

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de cinco años a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Este monitor de presión sanguínea cumple con los requisitos de la prueba de ciclos de medición simulada según la norma EN1060-3, parte 8.10. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio para su producto HoMedics, póngase en contacto con un Representante de Relaciones con el Consumidor por el teléfono 1-800 466-3342 para obtener asistencia. Asegúrese de tener a mano el número de modelo del producto.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a HoMedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.



**5 años  
garantía limitada**

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.









Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a las regulaciones de ciertos estados, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.






Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)

**HoMedics ® es una marca registrada de HoMedics, LLC.  
© 2009-2013 HoMedics, LLC. Todos los derechos reservados.**

**IB-BPW040C  
P/N: 323102177 VER:001**

**5 años  
garantía limitada**

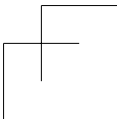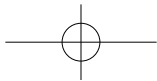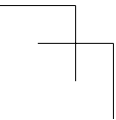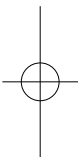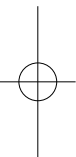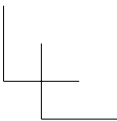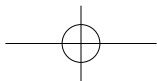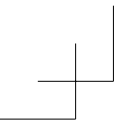

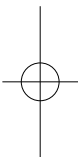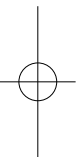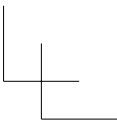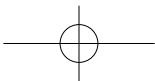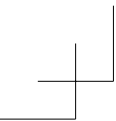

**IB-BPW040C**  
**P/N: 323102177 VER:001**

