

# BACKREST SUPPORTS



CustomAIR<sup>®</sup> Backrest Support  
OFCA-BLK

Highback Backrest Support  
OFHB-BLK



Lowback Backrest Support  
OFLB-BLK

Wideback Backrest Support  
OFWB-BLK



English, Español

## CONGRATULATIONS

on your purchase of an ObusForme by HoMedics Backrest Support.

Your backrest support contains an “S”-shaped frame that conforms to the contours of the back to guide the spine into correct alignment and place you in a proper sitting posture. The ObusForme by HoMedics Lowback Backrest Support, Wideback Backrest Support and Highback Backrest Support each offer an optional lumbar support pad, whereas the CustomAIR<sup>®</sup> Backrest Support features an internal, inflatable lumbar support system. Lightweight and portable, each backrest support turns any chair into an ergonomic seating system; they can be used in the home, office, vehicle, or anywhere else you sit.

### Frequently Asked Questions:

**Q. How does the Backrest Support fasten to a seat or chair?**

**A.** The Backrest Support stays in position when the elastic stretch loop is placed or stretched over most chairs or vehicle seats. The stretch loop is not necessary on couches or sofas. To use the Backrest Support in a car, truck, or any seat with an opening at the lower back, simply place the bottom ends of the straps through the bottom opening, place the top straps over the top of the seat and secure with buckles.

**Q. Why use a lumbar support pad or an internal inflatable lumbar support system?**

**A.** Both the lumbar support pad and the internal inflatable lumbar support system provide added support for the lower spine by filling in the lower inward curve of your back. Lumbar supports can be used for everyday use as extra lower back support.

**Please Note:** It is not necessary to use the lumbar support pad or the internal inflatable lumbar support system with your Backrest Support. If the lumbar support pad or internal inflatable lumbar support system feels bulky or uncomfortable, just remove it (or deflate if using CustomAir) from the Backrest Support.

**Q. How is the lumbar support pad positioned?**

**A.** Place your buttocks as far back into the Backrest Support as possible. Lean forward and insert the lumbar support pad horizontally across your lower back, above your belt line. Lean back so the hollow in the lower back is firmly supported. Whatever feels comfortable is right for you.

**Helpful Hint:** To prevent the loss of your lumbar support pad, we recommend you position it inside the backrest’s cover. Simply separate the fastener at the back of your backrest and place the lumbar support pad inside the cover towards the front of the backrest. Again, position it where it feels comfortable. Reseal the fastener.

**Q. Are there any other uses for the lumbar support pad?**


**A.** Yes, there are a variety of uses for the lumbar support pad:

- Use it as a bolster behind the ObusForme by HoMedics Backrest Support to reduce seat depth of chairs and sofas.
- Try it on its own for additional comfort and support in any chair.

- Try using it as a headrest when using the Highback Backrest Support.

**Q. How do I adjust the internal inflatable lumbar support system in the CustomAIR<sup>®</sup>? (Not applicable to all models)**

**A. INFLATE:** Rest your lower back against the CustomAIR. Pump the INFLATION VALVE located on the back bottom, right-hand side. Use your fingers to pump the INFLATION VALVE while gripping the front bottom, right-hand side of the CustomAIR with the thumb of your right hand. From full deflation, there are approximately 50 comfort positions for the internal inflatable lumbar support system. When you have reached the most comfortable position for your back, simply stop pumping. The level of air in the lumbar support will remain fixed indefinitely until changed.

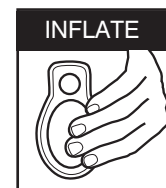

**DEFLATE:** Lean your lower back against the CustomAIR and fully deflate it by pressing the DEFLATION VALVE located on top of the INFLATION VALVE, on the back bottom, right-hand side of the CustomAIR.

**Q. How do I clean the Backrest Support?**

**A.** The ObusForme by HoMedics Backrest Support cover is made of synthetic materials. It’s easy to clean with a mild soap and a sponge, damp cloth, or soft brush. Do not rub the cover excessively or place it in a washing machine. The cover can be removed and hand washed in cool water. Hang to dry.

To smooth out wrinkled fabric, remove the backrest’s cover and iron it on low heat.

**Helpful Hint:** To increase the air circulation in your backrest, you may remove the thin plastic layer that lies between the foam and the cover. Simply separate the fastener at the back of your backrest, remove the cover, tear off the plastic layer, and replace the cover.

## Limited One Year Warranty

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address:

HoMedics Consumer Relations  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI 48390

No COD’s will be accepted.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer’s recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)

**For service or repair, do not return this unit to the retailer. Contact HoMedics Consumer Relations at:**

**Mail:**  
**HoMedics, Inc.**  
**Service Center Dept. 168**  
**3000 Pontiac Trail**  
**Commerce Township, MI**  
**48390**

**Email:** [cservice@homedics.com](mailto:cservice@homedics.com)

**Phone:** 1-800-466-3342  
**Business Hours:** 8:30am-5pm ET  
**Monday-Friday**

**Distributed by**  
**HOMEDICS**  
HoMedics, Inc.  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390

Printed in China

## LOS RESPALDOS CON SOPORTE



El respaldo con soporte CustomAIR<sup>®</sup>  
OFCA-BLK

El respaldo con soporte dorsal-cervical  
OFHB-BLK



El respaldo con soporte lumbar  
OFLB-BLK

El respaldo con soporte para  
espalda ancha  
OFWB-BLK



English, Español

### FELICITACIONES

por su compra de un respaldo con soporte  
ObusForme de HoMedics.

Su respaldo con soporte contiene un marco en forma de “S” que se adapta a la curvatura de la espalda para guiar la columna a la alineación correcta y colocarla en una posición apropiada al sentarse. El respaldo con soporte lumbar ObusForme de HoMedics, el respaldo con soporte para espalda ancha y el respaldo con soporte dorsal-cervical ofrecen una almohadilla de soporte lumbar opcional, mientras que el respaldo con soporte CustomAIR<sup>®</sup> presenta un sistema de soporte lumbar inflable interno. Liviano y portátil, cada respaldo con soporte convierte cualquier silla en un sistema ergonómico para sentarse, pueden usarse en el hogar, la oficina, el vehículo o en cualquier otro lugar en que se siente.

#### PREGUNTAS y FRECUENTAS:

**P. ¿Cómo se ajusta el respaldo con soporte ObusForme de HoMedics a un asiento o silla?**

**R.** El respaldo con soporte se mantiene en su lugar cuando la banda elástica se coloca o se estira sobre la mayoría de las sillas y asientos de vehículos. No es necesario usar la banda elástica en sofás.

Para usar el respaldo con soporte dorsal-cervical en un automóvil, camioneta o cualquier asiento con una abertura en la zona lumbar, simplemente coloque los extremos inferiores de las correas a través de la abertura inferior, coloque las correas superiores sobre la parte superior del asiento y asegure con las hebillas.

**P. ¿Por qué usar una almohadilla de soporte lumbar o un sistema de soporte lumbar inflable interno?**

**R.** Tanto la almohadilla de soporte lumbar como el sistema de soporte lumbar inflable interno proporcionan soporte adicional a la zona lumbar de la columna rellenando la curvatura inferior hacia adentro de su espalda. Los soportes lumbares pueden usarse a diario como soporte adicional para la zona lumbar.

**Atención:** no es necesario usar la almohadilla de soporte lumbar o el sistema de soporte lumbar inflable interno con su respaldo con soporte. Si la almohadilla de soporte lumbar o el sistema de soporte lumbar inflable interno se siente demasiado grande o incómodo, simplemente quítelo (o desínflelo en el caso del CustomAir) del respaldo con soporte.

**P. ¿Cómo se coloca la almohadilla de soporte lumbar?**

**R.** Apoye sus nalgas tan adentro del respaldo con soporte como sea posible. Inclínese hacia adelante y coloque la almohadilla de soporte lumbar horizontalmente sobre su espalda, arriba de la línea del cinturón. Inclínese hacia atrás para que el hueco en la zona lumbar de la espalda quede apoyado firmemente. Si lo hace sentir cómodo, está bien para usted.

**Sugerencia útil:** Para evitar la pérdida de su almohadilla de soporte lumbar, recomendamos que la coloque dentro de la funda del respaldo. Simplemente abra el cierre de la parte posterior de su respaldo y coloque la almohadilla de soporte lumbar dentro de la funda hacia el frente del respaldo. Nuevamente, colóquelo donde se sienta cómodo. Vuelva a cerrar el cierre.

**P. ¿Existen otros usos para la almohadilla de soporte lumbar?**



**R.** Sí, existen una variedad de usos para la almohadilla de soporte lumbar:

- Úselo como refuerzo detrás del respaldo con soporte ObusForme de HoMedics para reducir la profundidad del asiento en sillas y sofás.

- Pruébelo sólo para obtener comodidad y soporte adicionales en cualquier silla.
- Intente usarlo como apoyacabeza al usar el respaldo de soporte dorsal-cervical.

**P. ¿Cómo ajusto el sistema de soporte lumbar inflable interno del CustomAIR<sup>®</sup>? (No es aplicable a todos los modelos)**

**R. INFLADO:** Recueste la zona lumbar de su espalda contra el CustomAIR. Bombee la VÁLVULA DE INFLADO ubicada del lado derecho, en el inferior de la parte trasera. Bombee con sus dedos la VÁLVULA DE INFLADO mientras sostiene la parte inferior de la parte delantera del CustomAIR con el pulgar de su mano derecha. Desde el desinflado total, existen aproximadamente 50 posiciones de comodidad para el sistema de soporte lumbar inflable interno. Cuando haya alcanzado la posición más cómoda para su espalda simplemente deje de bombear. El nivel de aire en el soporte lumbar se mantendrá fijo por tiempo indefinido hasta que sea cambiado.

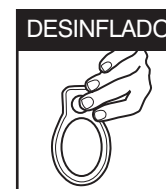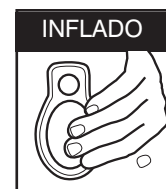

**DESINFLADO:** Recueste la zona lumbar de su espalda contra el CustomAIR y desínflelo por completo presionando la VÁLVULA DE DESINFLADO, que se encuentra del lado derecho del inferior de la parte trasera del CustomAIR.

**P. ¿Cómo limpio el respaldo con soporte ObusForme de HoMedics?**

**R.** La funda del respaldo con soporte ObusForme de HoMedics está hecha de materiales sintéticos. Es fácil de limpiar con jabón suave y una esponja, un paño húmedo o un cepillo blando. No frote la funda excesivamente ni la lave en la lavadora. La funda puede quitarse y lavarse a mano en agua fría. Cuelgue para secar.

Para alisar la tela arrugada, retire la funda del respaldo y pláncela con la configuración más baja de la plancha.

**Sugerencia útil:** Para aumentar la circulación de aire en el respaldo, puede quitar la fina capa plástica que hay entre la espuma y la funda. Simplemente abra el cierre en la parte trasera de su respaldo, retire la funda, rasgue la funda plástica y vuelva a colocar la funda.

### Garantía limitada por un año

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de un año a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio para su producto HoMedics, envíe por correo el producto y su recibo de compra fechado (como comprobante de compra), con franqueo pago, a la siguiente dirección:

HoMedics Consumer Relations  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI 48390

No se aceptarán pagos contra entrega.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a HoMedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS

MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en:

www.homedics.com

**Por servicio o reparación, no devuelva esta unidad al distribuidor. Póngase en contacto con Relaciones con el Consumidor de HoMedics por el:**

**Correo:**  
**HoMedics, Inc.,**  
**Service Center**  
**Dept. 168**  
**3000 Pontiac Trail**  
**Commerce Township, MI 48390**

**Correo electrónico:** cservice@homedics.com

**Teléfono:** 1-800-466-3342  
**Horario comercial:** 8:30 am a 5pm Hora del Este  
**De lunes a viernes**

**Distribuido por**  
**HOMEDICS**<sup>®</sup>

**HoMedics, Inc.**  
**3000 Pontiac Trail**  
**Commerce Township, MI**  
**48390**

**Impreso en China**