

## GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

HoMedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de un año a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. HoMedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio para su producto HoMedics, envíe por correo el producto y su recibo de compra fechado (como comprobante de compra), con franqueo pago, a la siguiente dirección:

HoMedics Service Center  
Dept. 168, Suite 3  
43155 West Nine Mile Rd.  
Novi, MI 48375

No se aceptarán pagos contra entrega.

HoMedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a HoMedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el periodo durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de HoMedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquél para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGUN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de HoMedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)

### Dirección postal:

HoMedics Service Center  
Dept. 168, Suite 3  
43155 West Nine Mile Rd.  
Novi, MI 48375

Correo electrónico:  
[cservice@homedics.com](mailto:cservice@homedics.com)

Phone: 1-800-466-3342

8:30 am-5 pm EST M-F

# ParaSpa Plus

## Paraffin Bath



## Instruction Manual and Warranty Information

PAR-300

El manual en  
español empieza  
a la página 9.

**1** year  
limited warranty

Moisturize dry hands and elbows and enjoy beautiful, glowing skin.

Thank you for purchasing the HoMedics ParaSpa Plus paraffin bath. This, like the entire HoMedics line, is built with high-quality craftsmanship. We hope that you'll find it to be the finest product of its kind.

The ParaSpa Plus turns your home into a salon, providing you with the ultimate experience.

## Paraffin Bath Features

- Soothing paraffin contours to your hands, elbows and feet.
- ParaSpa softens and smoothes dry skin
- Includes 4 lbs. of pure, hypoallergenic Paraffin Wax that does not contain scents or dyes to irritate sensitive skin

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING AN ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

### DANGER—TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not place appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. Store in a cool, dry place.
- Always unplug this appliance from the electrical outlet before cleaning and immediately after using
- Do not plug or unplug this product when hands are wet.
- Do not use while bathing

### WARNING—TO REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use attachments not recommended by HoMedics, specifically any attachment not provided with the unit.
- Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the HoMedics' Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not drop or insert any object into any opening unless specifically directed in this manual.
- An appliance should never be left unattended while plugged in.
- Do not carry this appliance by the supply cord or use the cord as a handle.
- Do not use outdoors. This appliance is designed for household use only.
- Do not operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.

**This unit is designed for household use only. This unit is not designed for commercial use.**

- Do not apply the paraffin near eyes or other sensitive areas.
- Do not allow the level of paraffin wax to fall below the "MIN" line inside of the tub.
- Never use sharp instruments to remove solidified paraffin wax from the unit.
- Use appliance on a sturdy level surface only.
- Always store this product in a cool, dry place.
- Do not use an extension cord with this product

### Caution:

**This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

**Caution—Please read all instructions carefully before operating.**

## SPECIAL WARNINGS:

IF YOU HAVE OR HAVE HAD ANY SKIN CONDITIONS, DISEASES AND OR HEALTH PROBLEMS, YOU SHOULD CONSULT YOUR PHYSICIAN BEFORE USE.

- This product is not intended for medical use. It is intended only to provide a luxurious paraffin bath.
- Not recommended for use by people with diabetes.
- Use bath only when seated. Do not stand on or in the tub unit.
- Do not apply paraffin wax on open cuts or wounds, warts, inflamed skin, or when the sensation of any extremities is decreased.
- Consult your physician if you have any questions or concerns about acute inflammation and peripheral vascular disease or decreased sensation of any extremity before using.
- Discontinue use and consult a physician if the paraffin wax feels too warm or if it does not feel warm enough. This may indicate a possible physical problem.
- Discontinue use and consult your physician if dermatitis, discomfort, irritation, or pain occurs from continued paraffin treatments.
- Test the paraffin wax on the inside of your wrist to make sure the temperature is comfortable.
- Do not overfill the unit and always keep the paraffin wax level about 2 inches from the top of the bath.
- Never operate the unit without paraffin wax.
- Do not melt paraffin wax in its plastic packaging, nor melt it over an open flame, on a range, stove or in a microwave.
- Do not pour the melted paraffin wax from the tub/unit.
- Unplug unit before filling with paraffin wax.
- Do not use accessories or wax not recommended or sold by HoMedics.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by HoMedics' Service Center.
- Do not put water into the tub/unit.

## Instructions for use:

This unit is controlled by a thermostat. The unit can hold a maximum of 4 lbs. of paraffin wax for operation. The melting time is less than 2 hours and it is designed to run continuously for 24 hours a day.

## Important Note:

This unit may feel very warm to sensitive skin. However, in order to fully experience the benefits of warm paraffin, the wax must be melted to a temperature between 123–131 degrees Fahrenheit. For proper application, quickly dip the body area (i.e. hand or elbow) into the melted paraffin wax and remove immediately. Wait a few seconds for wax to solidify. This should be repeated 6–10 times. Never soak in the wax for more than 1–2 seconds.

If you are very sensitive to heat or feel that this appliance may not be for you, please return this product to the place of purchase, **prior to use**.

### SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace. A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.

## How to set up the ParaSpa Plus unit:

1. Remove all contents from packaging and check to make sure you have all of the following components of the ParaSpa Plus paraffin bath:
  - Paraffin bath tub with locking lid
  - Plastic grate
  - Four 1 lb. bags of Paraffin Wax
  - 30 plastic liners
2. Place unit on a level and sturdy table or surface and open the lid.
3. Make sure ParaSpa Plus tub is empty before putting wax into tub.
4. Open the bags of Paraffin Wax and place wax in the tub. Open only as many bags as you plan to use. The unit is designed to hold a maximum of 4 lbs. of paraffin wax and a minimum of 3 lbs. See Fig. 1 Always keep the level of paraffin wax filled to the "MIN" level marked on the inside of the tub.
5. Plug the unit into a 120V A/C household outlet.
6. Close the locking lid. Push power button. "Heating" light will flash while wax is melting. See Fig. 2 The paraffin wax should melt in less than 2 hours.
7. "Ready" light will come on when wax is completely melted. Open the lid and place the grate into the wax and allow it to sink to the bottom of the tub. See Fig. 3 The ParaSpa Plus unit is designed to be used at room temperature. If the wax starts to solidify or flakes form on the top surface, close lid and press power button. **NOTE:** The temperature of the room can have an effect on the unit's performance. Therefore we always recommend testing the paraffin temperature on the inside of the wrist area before dipping your entire hand or elbow.  
**NOTE:** NEVER open lid or dip your hand, foot or elbow while the "heating" light is flashing.  
**NOTE:** Place the grate into the unit only when the paraffin wax is melted.

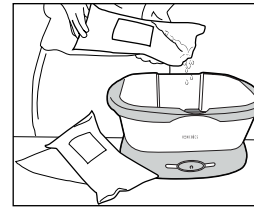


Figure 1

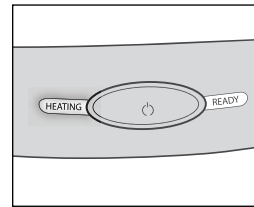


Figure 2

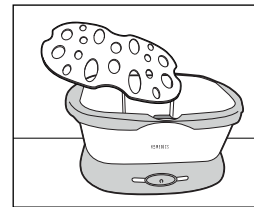


Figure 3

**NOTE:**  
**To avoid burns,**  
**be sure to add**  
**the grate before**  
**dipping.**



Figure 4

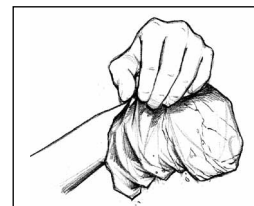


Figure 5

## How to use the paraffin bath:

1. Before immersing your hand or elbow test the paraffin wax on the inside of your wrist to make sure the temperature of the wax is comfortable. Remove all jewelry before dipping (i.e. rings, bracelets, watch).  
**NOTE:** It is suggested you wash the area to be treated and apply lanolin-based hand lotion over the area before dipping it into the paraffin wax. This will allow the wax to be removed easier and will help moisturize the skin.
2. Dip your hand, elbow or foot into the melted paraffin wax and remove immediately. Wait a few seconds until the wax solidifies. Try to avoid moving your hand or elbow while wax is applied.  
**NOTE:** Dipping process is quick. Do not leave hand or elbow in the tub. Do not soak. Dip quickly in and out.
3. Repeat this step several times until several layers have formed, 6–10 coatings are suggested.
4. For extended warmth, place a plastic liner (provided) over the treated area and twist bag at opening. Keep paraffin wax and liner on treated area for 10–20 minutes for ultimate luxury. See Fig. 4
5. Peel off the wax from the treated area. If using a plastic liner, peel the plastic lining from the area being treated. Paraffin wax will peel off with liner. See Fig. 5
6. Discard used wax.  
**NOTE:** If you are the only person using the ParaSpa Plus, the wax can be re-used. Simply put the wax back into the tub to re-melt.

## Maintenance:

Periodically, the used portion of paraffin wax should be replaced and the unit should be cleaned.

1. Unplug unit and remove grate. Allow paraffin wax to solidify overnight.
2. Push on one end of paraffin wax block. This will tip it up. Lift the block out of the unit and dispose of it. **DO NOT USE SHARP OBJECTS TO REMOVE THE PARAFFIN WAX BLOCK, THIS MAY SCRATCH OR DAMAGE THE TUB.** If the paraffin wax does not remove easily, plug unit in and allow to heat for 10–15 minutes then remove the paraffin wax block and unplug the unit.
3. Wipe the inside of the unit with a disposable towel to remove residual dirt and paraffin.
4. With a damp, soapy cloth, wipe clean. **DO NOT POUR WATER INTO THE UNIT, OR IMMERSE THE UNIT IN WATER.**
5. Store in a cool, dry place. When you are ready to re-use the ParaSpa Plus paraffin bath for the next heat treatment, repeat steps 2–7, “How to set up the ParaSpa Plus unit”. Then, follow steps 1–6, “How to use the paraffin treatment.”

# ParaSpa Plus

## Paraffin Bath



### 4-1lb. Bags of Paraffin Wax



## LIMITED ONE YEAR WARRANTY

HoMedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. HoMedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your HoMedics product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address:

HoMedics Service Center  
Dept. 168, Suite 3  
43155 West Nine Mile Rd.  
Novi, MI 48375

No COD's will be accepted.

HoMedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate HoMedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of HoMedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of HoMedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: [www.homedics.com](http://www.homedics.com)

### Mail To:

HoMedics  
HoMedics Service Center  
Dept. 168, Suite 3  
43155 West Nine Mile Rd.  
Novi, MI 48375

e-mail:  
[cservice@homedics.com](mailto:cservice@homedics.com)

Phone: 1-800-466-3342

8:30am-5pm EST M-F

# ParaSpa Plus

## Baño de Parafina



**Manual de instrucciones e  
información de garantía**

PAR-300

Humedezca las manos y codos secos y disfrute de un cutis bellissimo y renovado.

Gracias por comprar el baño de parafina ParaSpa Plus de HoMedics. Este producto, al igual que toda la línea HoMedics, está fabricado con mano de obra de alta calidad. Esperamos que lo encuentre como el mejor producto de su clase.

El ParaSpa Plus transforma su casa en un salón de belleza, brindándole una experiencia inolvidable.

## Características del baño de parafina

- La suavizante parafina se contorna a sus manos, codos y pies.
- El ParaSpa suaviza y alisa la piel seca.
- Incluye 3 lbs. de parafina pura, hipoalérgica que no contiene perfumes ni colorantes que irriten la piel sensible.

## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

CUANDO UTILIZA UN ARTEFACTO ELÉCTRICO, SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR CIERTAS PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUYENDO LO SIGUIENTE:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

### PELIGRO—PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO:

- No intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- No coloque el artefacto en un lugar donde pueda caerse o ser tirado hacia una tina o pileta. NO lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido. Guárdela en un lugar fresco y seco.
- Siempre desenchufe este artefacto del tomacorriente antes de limpiarlo e inmediatamente después de usarlo
- No enchufe ni desenchufe este producto cuando tenga las manos mojadas.
- No lo use mientras se baña

### ADVERTENCIA—PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO O LESIONES A LAS PERSONAS:

- Es necesaria una supervisión estricta cuando este artefacto es usado por niños o personas inválidas o con incapacidades o próximo a ellos
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual.
- No use accesorios no recomendados por HoMedics, específicamente ningún accesorio no proporcionado con la unidad.
- No haga funcionar este artefacto si tiene el cable o enchufe dañado, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o se dañó o si se dejó caer al agua. Envíelo al Centro de servicio HoMedics para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas excepto que se indique específicamente en este manual.
- No lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- No lo use en exteriores. Este artefacto está diseñado para uso doméstico exclusivamente.
- Un artefacto nunca debe ser dejado sin supervisión mientras esté enchufado.
- No lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- No aplique la parafina cerca de los ojos u otras áreas sensibles.
- No permita que el nivel de parafina caiga por debajo de la línea de "MIN" dentro del recipiente.
- Nunca use instrumentos filosos para quitar de la unidad la parafina solidificada.
- Use el artefacto únicamente sobre una superficie nivelada y firme.

**Esta unidad está diseñada para uso doméstico exclusivamente. Esta unidad no está diseñada para uso comercial.**

- Siempre guarde este producto en un lugar fresco y seco.
- No use un cable de extensión con este producto

### Precaución:

**Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, el enchufe está diseñado para calzar en un tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado.**

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**Precaución—Lea todas las instrucciones con atención antes de poner en funcionamiento.**

## ADVERTENCIAS ESPECIALES:

SI TIENE O HA TENIDO PROBLEMAS O ENFERMEDADES EN LA PIEL, Y/O PROBLEMAS DE SALUD, DEBE CONSULTAR A SU MÉDICO ANTES DE USAR.

- Este producto no está diseñado para uso médico. Está diseñado sólo para proporcionar un baño de parafina
- No se recomienda para el uso con personas que padecen de diabetes.
- Use el baño únicamente mientras está sentado. No se ponga de pie dentro ni sobre la unidad del recipiente.
- No aplique parafina sobre cortes o heridas abiertas, verrugas, piel inflamada o cuando la sensibilidad de cualquiera de las extremidades se encuentra disminuida.
- Antes de usar, consulte a su médico si tiene alguna pregunta o inquietud sobre inflamación aguda y enfermedades vasculares periféricas o sobre la disminución de la sensibilidad de cualquier extremidad.
- Deje de usar y consulte a un médico si siente la parafina demasiado caliente o si no la siente lo suficientemente tibia. Esto puede indicar un posible problema físico.
- Deje de usar y consulte a su médico si aparece dermatitis, incomodidad, irritación o dolor como consecuencia de tratamientos de parafina continuados.
- Pruebe la parafina en el interior de su muñeca para asegurarse de que la temperatura le resulta cómoda.
- No llene la unidad por encima del nivel máximo y mantenga siempre el nivel de parafina a aproximadamente 2 pulgadas de la parte superior del baño.
- Nunca haga funcionar la unidad sin parafina.
- No derrita la parafina en su empaque plástico ni sobre una llama, cocina, estufa u horno de microondas.
- No vierta la parafina derretida desde el recipiente/unidad.
- Desenchufe la unidad antes de llenarla con parafina.
- No use accesorios ni cera no recomendados o vendidos por HoMedics.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Centro de servicio de HoMedics.
- No ponga agua dentro del recipiente/unidad.

## Instrucciones de uso:

Esta unidad es controlada por medio de un termostato. Para su funcionamiento la unidad puede contener hasta 4 lbs. de parafina. El tiempo de derretido es menor a 2 horas y está diseñado para funcionar en forma continua 24 horas por día.

## Aviso importante:

Esta unidad puede sentirse demasiado caliente para pieles sensibles. Sin embargo, para experimentar totalmente los beneficios de la parafina caliente, la cera debe ser derretida a una temperatura comprendida entre los 123 y 131 grados Fahrenheit (50 y 55°C). Para una aplicación adecuada, sumerja rápidamente el área del cuerpo (es decir, mano o codo) en la parafina derretida y retírela inmediatamente. Esto debería repetirse de 6 a 10 veces. Espere algunos segundos para que la parafina se solidifique. Nunca deje sumergido en la cera durante más de 1 ó 2 segundos.

Si es muy sensible al calor o siente que este dispositivo puede no ser adecuado para usted, sírvase devolverlo al lugar de compra, antes de usarlo.

### MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO:

En un aparato de doble aislamiento, dos sistemas de aislamiento en lugar de puesta a tierra. No hay medios de puesta a tierra se proporciona en un aparato de doble aislamiento, ni un medio de conexión a tierra se añade al aparato. La reparación de un aparato de doble aislamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizado únicamente por personal cualificado. Las piezas de repuesto para un aparato de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que reemplazan. Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" o "DOBLE AISLAMIENTO". El símbolo (un cuadrado dentro de un cuadrado) también esté marcado en el aparato.

## Cómo ajustar la unidad ParaSpa Plus:

- Quite todo el contenido del paquete y verifíquelo para asegurarse de que tiene todos los siguientes componentes del baño de parafina ParaSpa Plus:
  - Recipiente de baño de parafina con tapa de seguridad
  - Rejilla plástica
  - Cuatro bolsas de 1 lb. de parafina
  - 30 cobertores plásticos
- Coloque la unidad en una mesa o superficie firme y nivelada, y abra la tapa.
- Asegúrese de que el recipiente ParaSpa Plus está vacío antes de poner cera en el mismo.
- Abra las bolsas de parafina y ponga la cera dentro del recipiente. Abra sólo la cantidad de bolsas que planea usar. La unidad está diseñada para contener un máximo de 4 lbs. de parafina y un mínimo de 3 lbs. **Vea la Fig. 1** Siempre mantenga el nivel de parafina en el nivel marcado "MIN" en el interior del recipiente, o por encima de éste.
- Enchufe la unidad en un tomacorriente doméstico de 120V C/A.
- Cierre la tapa de seguridad. Presione el botón de encendido. La luz "Heating" (calentando) destella mientras la parafina se derrite. Ver Figura 2. La parafina debería derretirse en menos de 2 horas.
- La luz "Ready" (listo) se enciende cuando la parafina se ha derretido por completo. Abra la tapa y coloque la rejilla dentro de la parafina y deje que se hunda hasta el fondo del recipiente. Vea la Fig. 3. La unidad ParaSpa Plus está diseñada para ser usada a temperatura ambiente. Si la parafina comienza a solidificarse o forma escamas en la superficie, cierre la tapa y oprima el botón de encendido.  
**NOTA:** La temperatura ambiente puede ejercer un efecto en el rendimiento de la unidad. Por lo tanto, siempre recomendamos probar la temperatura de la parafina sobre el interior del área de la muñeca antes de sumergir toda su mano o codo.  
**NOTA:** No abra NUNCA la tapa o bañe su mano, pie o codo mientras la luz "heating" esté destellando.  
**NOTA:** Coloque la rejilla dentro de la unidad únicamente cuando la parafina ya esté derretida.

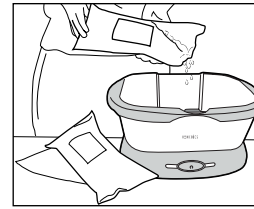


Figure 1

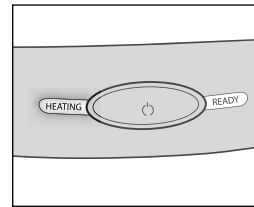


Figure 2

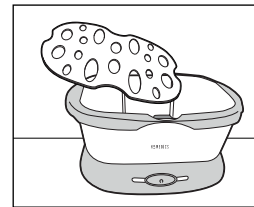


Figure 3

**\*NOTA: para evitar quemaduras, asegúrese de colocar la rejilla antes de sumergir su mano.**



Figure 4

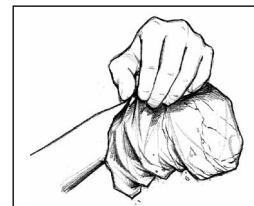


Figure 5

## Cómo usar el baño de parafina:

- Antes de sumergir su mano o codo, pruebe la parafina en el interior de su muñeca para asegurarse de que la temperatura de la cera le resulta cómoda. Quítese todas las alhajas antes de sumergir su mano (es decir, anillos, pulseras, reloj).  
**NOTA:** Se recomienda lavar el área a tratar, y aplicar una loción de manos a base de lanolina sobre el área antes de sumergirla en la parafina. Esto permitirá quitar la cera más fácilmente y le ayudará a humectar la piel.
- Sumerja su mano, codo o pie dentro de la parafina derretida y retírela de inmediato. Espere algunos segundos hasta que la cera se solidifique. Intente evitar mover su mano o codo mientras la cera está aplicada.  
**NOTA:** El proceso de inmersión es rápido. No deje la mano o codo dentro del recipiente. No lo deje en remojo. Sumerja y retire rápidamente.
- Repita este paso varias veces hasta que se hayan formado varias capas, se sugieren 6-10 capas.
- Para un tratamiento de calor más prolongado, coloque una cubierta plástica (proporcionada) sobre el área tratada y doble la bolsa en la abertura. Mantenga la parafina y el cobertor sobre el área tratada durante 10-20 minutos para una experiencia excepcional. **Vea la Fig. 4**
- Quite la cera del área tratada. Si usó un cobertor plástico, quite el cobertor plástico del área que está siendo tratada. La parafina se quitará junto con el cobertor. **Vea la Fig. 5**
- Deseche la cera usada.

**NOTA:** Si usted es la única persona que usa el ParaSpa Plus, la cera puede volver a usarse; simplemente vuelva a colocarla dentro del recipiente para volver a derretirla.

## Mantenimiento:

Periódicamente, se debe reemplazar la porción de parafina usada y se debe limpiar la unidad.

1. Desenchufe la unidad y quite la rejilla. Deje que la parafina se solidifique durante la noche.
2. Presione sobre un extremo del bloque de parafina. Esto hará que se levante el extremo opuesto. Levante el bloque y retírelo de la unidad para desecharlo. **NO USE OBJETOS FILOSOS PARA QUITAR EL BLOQUE DE PARAFINA, ESTO PUEDE RAYAR O DAÑAR EL RECIPIENTE.** Si no puede quitar el bloque de parafina con facilidad, enchufe la unidad y deje que caliente durante 10-15 minutos, luego quite el bloque de parafina y desenchufe la unidad.
3. Limpie el interior de la unidad con una toalla desechable para quitar residuos de suciedad y parafina.
4. Limpie la unidad con un paño humedecido y enjabonado. **NO VIERTA AGUA DENTRO DE LA UNIDAD NI LA SUMERJA EN AGUA.**
5. Guárdela en un lugar fresco y seco. Cuando esté listo para volver a usar el baño de parafina ParaSpa Plus para el siguiente tratamiento de calor, repita los pasos del 2 al 7, "cómo ajustar la unidad ParaSpa Plus." Luego siga los pasos 1-6, "Cómo usar el tratamiento de parafina."

# ParaSpa Plus

## Baño de Parafina



**4-1 lb. Bolsas de parafina**

